

NEW GRANO

PARTICLE HARDNESS TESTER

粒子硬度測定装置 グラノ




NEW GRANO

Strong Point

各種素材の硬度や粒子径を簡単操作でスピーディに測定可能。
低荷重から高荷重の硬度までワンタッチ切替えて幅広く測定できます。

- 各種素材の硬度や粒子径を、簡単操作でスピーディに測定します。
- 低荷重から高荷重の硬度まで、ワンタッチの切替えて幅広く測定可能です。
- 硬度スケール毎のロードセル交換は必要ありません。
- CCDカメラによる観測のため、粒径 $30\mu\text{m}$ 以下の粒子も測定可能になりました。
- 1gf以下の硬度測定も可能です。
- 本体・操作部が一体型になっており、持ち運びに便利です。
- 測定データはUSB出力により、Excelにダイレクトで転送できます。

NEW GRANO

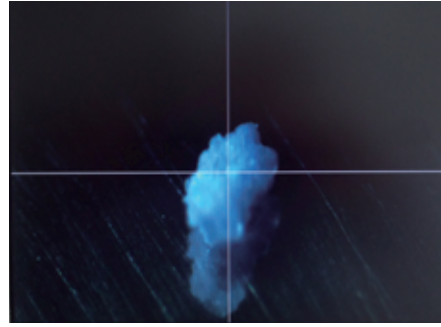

▲粒子観測用 CCD モニター




▲メニュー画面

測定画面 ▼



▲測定はタッチパネルにより、簡単に操作が可能です

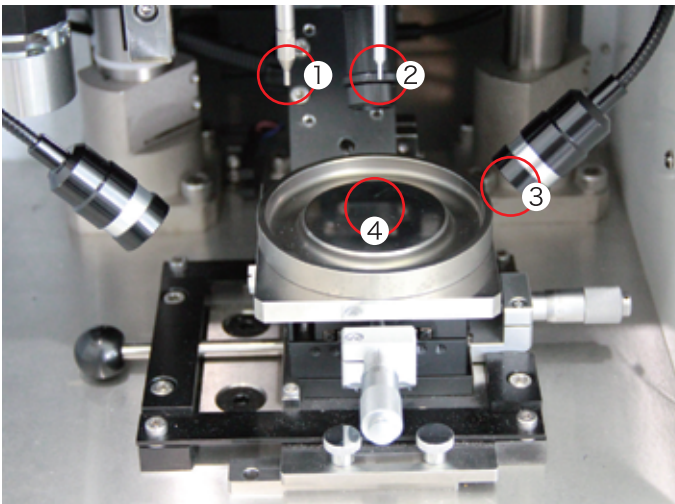


▲低荷重、高荷重の切り替えは、試料台をスライドさせるだけでOK。

【測定部】

- ① 高荷重用測定端子
- ② 低荷重用測定端子
- ③ LED 照明
- ④ 試料台

【仕様】

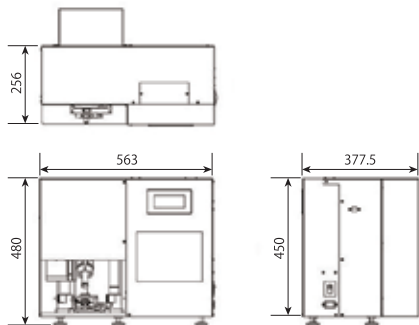

寸法	W563mm×D377.5mm×H450mm
重量	25kg
測定対象試料	5μm以上
測定硬度範囲	0.5gf~20kgf
電源	AC100V 10A

- 本カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 商品の色は、印刷の具合によって実物とは若干異なる場合がございます。



本 社 157-0062 東京都世田谷区南烏山4-27-8
 TEL 03-3308-1217 FAX 03-3326-9678
 未 来 望 157-0062 東京都世田谷区南烏山4-27-8
 みらほ TEL 03-3300-5677 FAX 03-3326-9630
 テクニカル 028-6902 岩手県二戸市浄法寺町明神沢56-2
 センター TEL 0195-39-1102 FAX 0195-39-1103
 仙台支店 981-3501 宮城県黒川郡大郷町大松沢字馬場崎1-1

